

NORIKS Bunion Fix — Hallux-valgus-Korrektor

Schrittweise Ausrichtung der Großzehe mit 30 Minuten bis 3 Stunden täglich.

Größe	Universal — passt für alle Fußgrößen
Seite	Derselbe Korrektor für den linken und den rechten Fuß
Auflage	Weiche Innenauflage, die die Haut schützt
Einstellung	Elastische Bänder mit einstellbarer Dehnung
Empfohlen	Von 30 Minuten bis 3 Stunden täglich



IM PAKET

- 1 Hallux-valgus-Korrektor
- Elastische Bänder zum Einstellen


SCHNELLSTART

1. Legen Sie den Korrektor so an, dass das Polster am hervorstehenden Knochen liegt und die Schlaufe die Großzehe umfasst.
2. Ziehen Sie das Band nur so weit an, dass Sie eine leichte Dehnung spüren — niemals bis zum Schmerz.
3. Tragen Sie ihn in der ersten Woche 30 Minuten täglich und verlängern Sie danach schrittweise.

1. Anlegen

- 1 Setzen Sie sich hin und stützen Sie den Fuß so ab, dass die Zehen entspannt sind.
- 2 Führen Sie die Großzehe durch die Schlaufe, bis das Polster am hervorstehenden Knochen an der Fußseite anliegt.
- 3 Führen Sie das Band um die Fußmitte und ziehen Sie es nur so weit an, dass Sie eine leichte Dehnung spüren.
- 4 Prüfen Sie, dass das Polster glatt und faltenfrei liegt und das Band den Fußrücken nicht einschnürt.
- 5 Die Großzehe soll nach außen gezogen sein, jedoch ohne schmerzhaftes Spannung.

Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

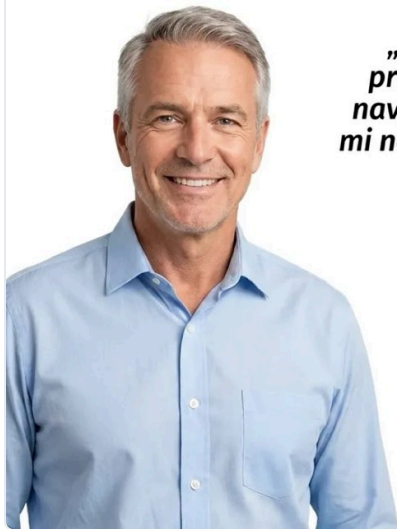

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Der Korrektor umfasst die Großzehe und entlastet den hervorstehenden Knochen.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija poravnanja



Patentirani zglobovi mehanizam



Podizivo rastezanje



Meko jastučić za čukalj



Vrhunski izdržljivi materijali



Bezbolno poravnanje

Ziel ist die schrittweise Rückführung der Großzehe in eine geradere Stellung.

2. Trageplan

Zeitraum	Täglich	Wann
1. Woche	30 Minuten	Abends im Sitzen
2. Woche	45 – 60 Minuten	Abends oder in Ruhephasen
3. Woche	1 – 2 Stunden	Auf zwei Abschnitte verteilt
Ab der 4. Woche	2 – 3 Stunden	In einem oder zwei Abschnitten, je nach Komfort

Regelmäßigkeit ist wichtiger als Dauer. Dreißig Minuten jeden Tag bringen mehr als drei Stunden einmal pro Woche.

3. Was Sie erwarten können

- Erste Tage: ein Dehnungs- und Entlastungsgefühl nach dem Abnehmen des Korrektors.
- Nach etwa zwei Wochen konsequenter Anwendung: weniger Beschwerden beim Gehen und Stehen.
- Nach etwa einem Monat: eine sichtbarere Veränderung der Zehenstellung.
- Der Korrektor wirkt während des Tragens und bei regelmäßiger Anwendung — er ist keine einmalige Lösung.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Schmerzen beim Tragen	Band zu fest angezogen	Band lösen; das Gefühl muss Dehnung sein, niemals Schmerz
Der Korrektor rutscht von der Zehe	Band zu locker oder feuchte Haut	Fuß abtrocknen und das Band eine Stufe fester ziehen
Rötung auf der Haut	Falte in der Auflage oder anfangs zu langes Tragen	Auflage glatt streichen und die Tragezeit auf 30 Minuten verkürzen

5. Reinigung

- Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen, abspülen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht in der Waschmaschine waschen und nicht auf der Heizung trocknen — das Gummi verliert seine Spannung.

Tragen Sie den Korrektor nicht über offenen Wunden oder entzündeter Haut. Bei Diabetes, vermindertem Gefühl im Fuß oder starken, anhaltenden Schmerzen halten Sie zuerst ärztliche Rücksprache.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- Rückgabe oder Umtausch können Sie innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung anmelden.
- Das Produkt muss unbenutzt und ungewaschen in der Originalverpackung sein, mit beiliegendem Beleg.
- Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde — außer das Produkt kam beschädigt an oder es wurde der falsche Artikel geliefert.
- Die Rückerstattung erfolgt auf PayPal oder IBAN, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Eingang der Sendung.
- Für Rückgabe oder Umtausch schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

Kommt das Produkt beschädigt oder mit einem Verarbeitungsfehler an, melden Sie sich sofort — das klären wir ohne Kosten für Sie.

Bunion Fix ist eine Alltagsunterstützung, keine medizinische Behandlung. Es stellt keine Diagnose und ersetzt keinen ärztlichen Rat. Halten Beschwerden an, verstärken sie sich oder treten sie nach einer Verletzung auf, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.