

NORIKS KneeFix — orthopädische Kniebandage

Einstellbare Kompression, seitliche Stabilisatoren und Gelpolster für die Kniescheibe.

Kompression	Über ein Rädchen einstellbar, ohne die Bandage abzunehmen
Stabilisierung	Zwei seitliche Stabilisatoren
Polster	Gelpolster, das die Kniescheibe umschließt
Halt	Silikonrand gegen Verrutschen
Größen	S/M – 2XL nach Körpergewicht; Ausführung für linkes und rechtes Knie



IM PAKET

- 1 Kniebandage (Kennzeichnung L = links, R = rechts)

SCHNELLSTART

1. Prüfen Sie die Kennzeichnung für das linke oder rechte Knie.
2. Ziehen Sie das Rädchen nach außen, um es zu lösen, und ziehen Sie die Bandage dann wie einen Strumpf an.
3. Richten Sie die Öffnung um die Kniescheibe aus und ziehen Sie die Kompression schrittweise an.

1. Größenwahl

Größe	Körpergewicht
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Die Bandage wird getrennt für das linke und das rechte Knie gefertigt. Prüfen Sie vor dem Anlegen die Kennzeichnung — verkehrt angelegt sitzen die Stabilisatoren nicht an der richtigen Stelle.

2. Anlegen

- 1 Ziehen Sie das Rädchen nach außen — erst dann löst es sich und die Bandage lässt sich lockern oder abnehmen.
- 2 Ziehen Sie die Bandage über den Fuß bis zum Knie, wie einen Strumpf.
- 3 Richten Sie sie so aus, dass die Öffnung genau um die Kniescheibe liegt und das Gelpolster sie umschließt.
- 4 Prüfen Sie, dass die seitlichen Stabilisatoren neben dem Knie liegen und nicht vorne.
- 5 Drücken Sie das Rädchen zurück und ziehen Sie die Kompression durch Drehen schrittweise bis zu einem angenehmen Gefühl von Halt an.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Drei Schritte zum richtigen Sitz.



Precizni kotačić za kompresiju

Prilagodljiva kompresija i siguran dosjed


Silikonski grip protiv klizanja

Mekana silikonska tekstura sprječava klizanje i uvijanje.



Dvostruki bočni stabilizatori

Bočna stabilnost koljena

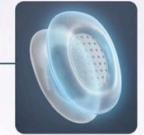

GEL jastučić za patelu

Rasterećenje pritiska i ublažavanje udaraca

Rädchen, seitliche Stabilisatoren und Gelpolster.

3. Kompression einstellen

- Passen Sie die Kompression über den Tag an: fester beim Gehen, auf Treppen und bei längerem Stehen, lockerer beim Sitzen und Ausruhen.
- Eine richtig angezogene Bandage **verrutscht** beim Gehen nicht, und der Unterschenkel behält normale Farbe und Wärme.
- Zum Abnehmen immer zuerst das Rädchen nach außen ziehen; ziehen Sie die Bandage nie über das angezogene Rädchen.



Die seitlichen Stabilisatoren folgen der Beugung des Knies.

4. Wie lange tragen

- Erste Tage: 2 – 3 Stunden täglich, bis sich das Knie daran gewöhnt.
- Danach: während Tätigkeiten, die das Knie belasten — Gehen, Arbeit, Training, Treppen.
- Tragen Sie sie nicht während des Schlafens.

5. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Die Bandage rutscht nach unten	Zu schwache Kompression oder feuchte Haut	Rädchen eindrücken und nachziehen; den Silikonrand mit einem feuchten Tuch abwischen, damit er wieder haftet

Was passiert	Ursache	Lösung
Kribbeln oder Taubheit im Unterschenkel	Zu starke Kompression	Ziehen Sie das Rädchen sofort nach außen; klingt das Gefühl nicht in wenigen Minuten ab, nehmen Sie die Bandage ab
Die Öffnung sitzt nicht um die Kniescheibe	Bandage zu tief angezogen oder falsche Ausführung L/R	Kennzeichnung prüfen und die Bandage so verschieben, dass das Polster die Kniescheibe umschließt
Die Bandage wirft in der Kniekehle Falten	Zu große Größe	Nehmen Sie die kleinere Nummer laut Gewichtstabelle

6. Wäsche und Pflege

- Handwäsche bei 30 °C mit mildem Waschmittel, ohne Weichspüler und Bleichmittel.
- An der Luft liegend trocknen. Nicht im Trockner, auf der Heizung oder in der Sonne.
- Den Silikonrand gelegentlich mit einem feuchten Tuch abwischen, damit er haften bleibt.
- Rädchen und Führungen trocken und frei von Sand und Staub halten.

KneeFix ist eine Alltagsunterstützung und keine medizinische Behandlung. Bei akuter Verletzung, starker Schwellung, überwärmtem oder instabilem Knie sowie nach einer Operation entscheiden Sie über das Tragen gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

7. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- Rückgabe oder Umtausch können Sie innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung anmelden.
- Das Produkt muss unbenutzt und ungewaschen in der Originalverpackung sein, mit beiliegendem Beleg.
- Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde — außer das Produkt kam beschädigt an oder es wurde der falsche Artikel geliefert.
- Die Rückerstattung erfolgt auf PayPal oder IBAN, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Eingang der Sendung.
- Für Rückgabe oder Umtausch schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

Kommt das Produkt beschädigt oder mit einem Verarbeitungsfehler an, melden Sie sich sofort — das klären wir ohne Kosten für Sie.

KneeFix ist eine Alltagsunterstützung, keine medizinische Behandlung. Es stellt keine Diagnose und ersetzt keinen ärztlichen Rat. Halten Beschwerden an, verstärken sie sich oder treten sie nach einer Verletzung auf, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.