


NORIKS FIT — Kompressionsshirt

Eng anliegende Kompression, die die Silhouette glättet und eine aufrechte Haltung unterstützt.

Gewebe	Kompressionsgestrick mit mikrogewebten Fasern
Größen	S – 5XL nach Körpergewicht
Tragen	4 – 10 Stunden täglich, unter der Kleidung
Wäsche	Kalt, Schonprogramm, ohne Weichspüler
Trocknen	An der Luft — der Trockner zerstört die Kompression

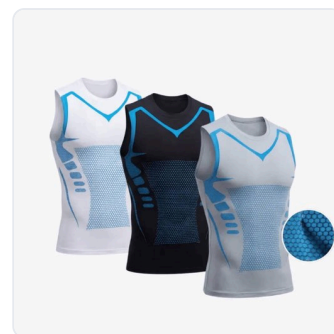

IM PAKET

- 1 Kompressionsshirt (je nach gewähltem Paket)

SCHNELLSTART

1. Wählen Sie die Größe nach dem Körpergewicht; für stärkere Kompression die kleinere Nummer.
2. Ziehen Sie das Shirt von unten nach oben an und streichen Sie den Stoff dabei mit der Handfläche glatt.
3. Kalt waschen und an der Luft trocknen — niemals im Trockner.

1. Größenwahl

Größe	Körpergewicht
S	50 – 70 kg
M	70 – 90 kg
L	90 – 110 kg
XL	110 – 130 kg
2XL	130 – 150 kg
3XL	150 – 170 kg
4XL	170 – 190 kg
5XL	190 – 210 kg

Wählen Sie die Größe nach dem Gewicht, nicht nach der Größe eines normalen Shirts. Zwischen zwei Größen: Die kleinere Nummer gibt stärkere Kompression, die größere mehr Komfort beim ganztägigen Tragen.

2. Anziehen

1. Rollen Sie das Shirt bis zum Kragen auf, wie einen Strumpf.
2. Führen Sie Kopf und Arme hindurch und rollen Sie es dann nach unten ab.
3. Streichen Sie den Stoff mit der Handfläche von der Taille zur Brust glatt, damit nirgends eine Falte bleibt.
4. Ziehen Sie den unteren Rand über die Hüften — so rollt sich das Shirt nicht nach oben.

Kako NORIKS djeluje?

Aktivna kompresija koja uklanja muške grudi

Ionska zona koja poboljšava formu, jača mišiće i podiže energiju

Pojačano djelovanje na salo oko struka za razgradnju masnih stanica



Die Kompression glättet die Silhouette gleichmäßig.



Der Unterschied in der Haltung mit und ohne Shirt.

3. Wie lange tragen

- Erste Tage: 3 – 4 Stunden täglich, bis Sie sich an den Druck gewöhnt haben.
- Danach: 8 – 10 Stunden, über den Arbeitstag.
- Schlafen Sie nicht darin — die Haut braucht eine Phase ohne Kompression.
- Für eine sichtbare Wirkung auf die Haltung täglich tragen; die ersten Veränderungen beschreiben Nutzer meist nach etwa zwei Wochen.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Das Shirt rollt sich nach oben	Zu kurze oder zu kleine Größe	Den Rand über die Hüften ziehen; wiederholt sich das, die größere Nummer nehmen
Erschwerte Atmung beim Sitzen	Zu kleine Nummer gewählt	Auf die größere Nummer wechseln — die Kompression darf die Atmung nicht einschränken
Die Kompression hat nachgelassen	Trockner oder Weichspüler	Kalt waschen, ohne Weichspüler, an der Luft trocknen
Rötung unter der Achsel	Falte im Stoff oder zu langes erstes Tragen	Den Stoff glatt streichen und die Tragezeit auf 3 – 4 Stunden verkürzen

5. Wäsche und Pflege

- Maschinenwäsche kalt im Schonprogramm, auf links gedreht.
- Kein Bleichmittel und kein Weichspüler.
- Nicht im Trockner trocknen — an der Luft liegend trocknen, damit Kompression und Form erhalten bleiben.
- Nicht bügeln.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- 30 Tage Geld-zurück-Garantie — senden Sie das Produkt im erhaltenen Zustand zurück.
- Kostenloser Größentausch innerhalb von 90 Tagen. Eine E-Mail genügt, kein Papierkram.
- Für Umtausch oder Rückgabe schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

NORIKS · Die Anleitung gilt für das im Titel dieses Dokuments genannte Produkt. Fragen und Größentausch: info@noriks.com · noriks.com/de