

NORIKS ErgoSit – orthopädisches Sitzkissen

Steißbein-Aussparung und Memory-Schaum hoher Dichte für langes Sitzen.

Schaum	OrthoFlex Memory-Schaum hoher Dichte
Zertifikat	OEKO-TEX®, ungiftig
Form	Steißbein-Aussparung, konturierte Abstützung für Hüften und Wirbelsäule
Bezug	Abnehmbar, maschinenwaschbar
Anwendung	Bürostuhl, Auto, Reisen



IM PAKET

- 1 Kissen ErgoSit
- Abnehmbarer waschbarer Bezug

SCHNELLSTART

1. Nehmen Sie das Kissen aus der Verpackung und lassen Sie es 24 Stunden liegen, damit der Schaum seine volle Form annimmt.
2. Legen Sie es so auf den Stuhl, dass die Aussparung hinten liegt, unter dem Steißbein.
3. Setzen Sie sich ganz nach hinten, die Füße flach auf dem Boden.

1. Vor dem ersten Gebrauch

- Das Kissen ist für den Transport komprimiert — lassen Sie es nach dem Auspacken 24 Stunden bei Raumtemperatur liegen. Kneten und schütteln Sie es in dieser Zeit mehrmals mit den Händen, damit sich der Schaum verteilt.
- Der Geruch von neuem Schaum verfliegt nach einigen Stunden Lüften.


2. Richtiges Auflegen

- 1 Legen Sie das Kissen so auf die Sitzfläche, dass die **Aussparung hinten** liegt — unter dem Steißbein, nicht vorne.
- 2 Der flache Teil des Kissens muss vollständig auf der Sitzfläche aufliegen, ohne über die Kante zu ragen.
- 3 Setzen Sie sich ganz nach hinten, sodass der Rücken die Lehne berührt.
- 4 Stellen Sie die Stuhlhöhe so ein, dass die Knie auf Hüfthöhe oder etwas tiefer sind und die Füße flach auf dem Boden stehen.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Die Aussparung nimmt den direkten Druck vom Steißbein.

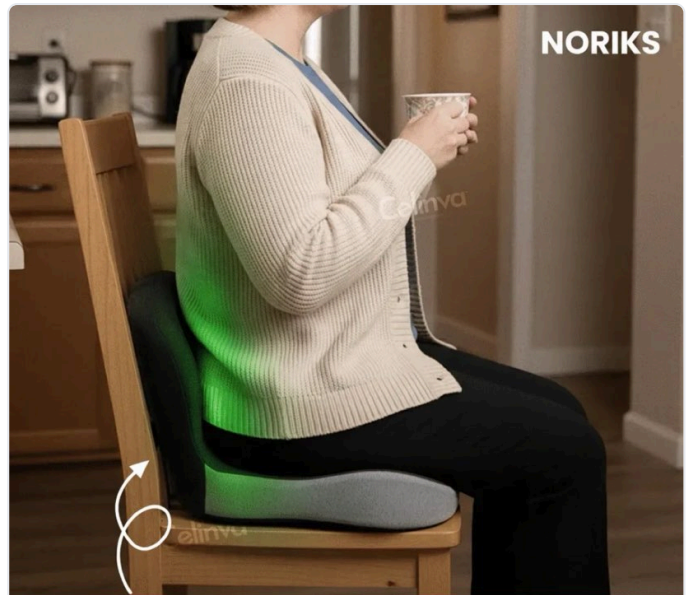

Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Die konturierte Form verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die Hüften.

3. Täglicher Gebrauch

- Das Kissen ist für tägliches Sitzen gedacht — im Büro, im Auto und auf Reisen.
- Stehen Sie auch mit Kissen jede Stunde auf und gehen Sie einige Minuten.
- Verwenden Sie es nicht auf sehr weichen oder unebenen Unterlagen — die Abstützung geht verloren.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Das Kissen rutscht auf dem Stuhl	Glatte Sitzbezug	Den Bezug mit der rutschhemmenden Seite nach unten drehen; auf Lederstühlen eine dünne Unterlage verwenden
Der Druck auf das Steißbein besteht weiter	Die Aussparung zeigt nach vorne	Kissen drehen — die Aussparung gehört nach hinten
Der Schaum wirkt hart	Kalter Raum	Memory-Schaum wird bei Körpertemperatur nach wenigen Minuten weicher
Das Kissen ist zu hoch für den Schreibtisch	Nicht angepasste Stuhlhöhe	Den Stuhl um die Kissenhöhe absenken

5. Wäsche und Pflege

- Den Bezug abnehmen und bei 30 °C im Schonprogramm in der Maschine waschen.
- **Den Schaum niemals in der Maschine waschen und nicht in Wasser tauchen.** Flecken mit einem feuchten Tuch abwischen und an der Luft trocknen lassen.
- Den Schaum nicht auf der Heizung oder in direkter Sonne trocknen.
- Das Kissen nicht unter Last zusammengedrückt lagern — der Schaum behält seine Form nur unbelastet.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- Rückgabe oder Umtausch können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anmelden.

- Das Produkt muss unbenutzt und ungewaschen in der Originalverpackung sein, mit beiliegendem Beleg.
- Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde — außer das Produkt kam beschädigt an oder es wurde der falsche Artikel geliefert.
- Die Rückerstattung erfolgt auf PayPal oder IBAN, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Eingang der Sendung.
- Für Rückgabe oder Umtausch schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

Kommt das Produkt beschädigt oder mit einem Verarbeitungsfehler an, melden Sie sich sofort — das klären wir ohne Kosten für Sie.

ErgoSit ist ein Kissen zur Alltagsunterstützung beim Sitzen, keine medizinische Behandlung. Es stellt keine Diagnose und ersetzt keinen ärztlichen Rat. Halten Beschwerden an, verstärken sie sich oder treten sie nach einer Verletzung auf, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.