

NORIKS KidsNest — orthopädisches Kinderkissen

Drei Größen, die mit dem Kind mitwachsen und die richtige Kopfhaltung unterstützen.

Schaum	Hypoallergener Memory-Schaum, OEKO-TEX®-zertifiziert
Frei von	Formaldehyd, Schwermetallen und BPA
Größen	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 14 Jahre
Bezug	Atmungsaktiv, abnehmbar, maschinenwaschbar
Form	Mulde für den Kopf und Stütze für die Nackenkrümmung



IM PAKET

- 1 Kissen KidsNest
- Abnehmbarer waschbarer Bezug

SCHNELLSTART

1. Wählen Sie die Größe nach dem Alter des Kindes; liegt es zwischen zwei Größen, nehmen Sie die größere.
2. Lassen Sie das Kissen 24 Stunden liegen, damit der Schaum seine volle Form annimmt, und kneten Sie es mehrmals mit den Händen durch.
3. Der Kopf des Kindes liegt in der Mulde, die Schultern bleiben auf der Matratze.

1. Größenwahl

Größe	Alter des Kindes	Verwendung
1	1 – 3 Jahre	Erstes Kissen nach dem Babybett
2	3 – 9 Jahre	Zeit der stärksten Entwicklung von Kiefer und Gaumen
3	9 – 14 Jahre	Schulalter und frühe Jugendzeit

Liegt das Kind zwischen zwei Größen, wählen Sie immer die **größere** — das Kissen ist so geformt, dass es die gesunde Ausrichtung während des Wachstums unterstützt.



Ages 1-3

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

Ages 3-9

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

Ages 9-18


Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm

Größen nach dem Alter des Kindes.

2. Auflegen

- ➊ Nehmen Sie das Kissen aus der Verpackung und lassen Sie es 24 Stunden liegen; kneten Sie es in dieser Zeit mehrmals mit den Händen durch, damit sich der Schaum verteilt.
- ➋ Ziehen Sie den Bezug auf und legen Sie das Kissen an das Kopfende der Matratze.
- ➌ Der Kopf des Kindes liegt in der Mulde, der höhere Rand stützt den Nacken.
- ➍ Die Schultern bleiben auf der Matratze — nicht auf dem Kissen.
- ➎ Prüfen Sie von der Seite: Kopf, Nacken und Wirbelsäule sollen eine gerade Linie bilden.

Savršeno poravnano, cijelu noć.

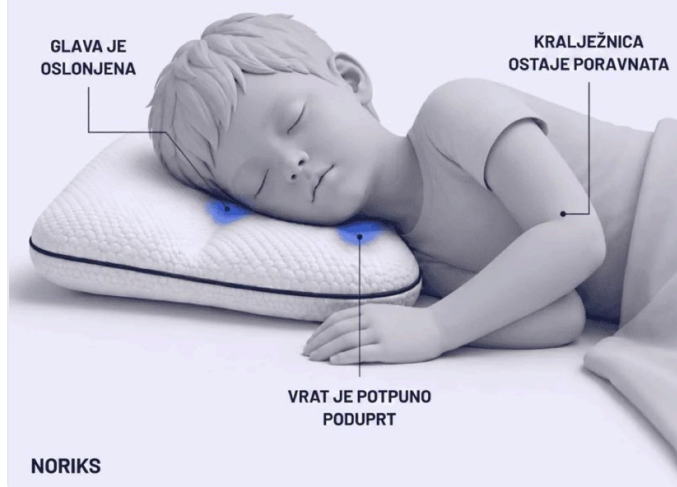

Richtige Ausrichtung von Kopf, Nacken und Wirbelsäule.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



Die Mulde hält den Kopf die Nacht über in der Mitte.

3. Eingewöhnung

- In den ersten Nächten gewöhnt sich das Kind an die neue Abstützung — das ist normal.
- Schläft das Kind auf der Seite, stützt das Kissen den Nacken ebenso; die Höhe ist nach dem Alter gewählt.
- Legen Sie kein zweites Kissen unter das KidsNest — damit ist die Höhe hinfällig.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Das Kind rutscht nachts vom Kissen	Das Kissen liegt zu weit vom Kopfende entfernt	An das Kopfende schieben, sodass es nicht nach hinten rutschen kann
Das Kissen wirkt zu hoch	Größere Größe für ein kleineres Kind gewählt	Beim Übergang ist die größere Größe gewollt; ist der Unterschied groß, gegen die kleinere tauschen
Der Schaum ist morgens hart	Kaltes Zimmer	Memory-Schaum wird bei Körpertemperatur in wenigen Minuten weicher
Der Bezug ist eingelaufen	Wäsche wärmer als 30 °C	Bei 30 °C waschen und an der Luft trocknen

5. Wäsche und Pflege

- Den Bezug bei 30 °C im Schonprogramm in der Maschine waschen; an der Luft trocknen.
- **Den Schaum nicht waschen und nicht in Wasser tauchen.** Lüften Sie ihn einmal im Monat.
- Das Kissen nicht in direkte Sonne legen und nicht auf der Heizung trocknen.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- Rückgabe oder Umtausch können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anmelden.
- Das Produkt muss unbenutzt und ungewaschen in der Originalverpackung sein, mit beiliegendem Beleg.

- Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde — außer das Produkt kam beschädigt an oder es wurde der falsche Artikel geliefert.
- Die Rückerstattung erfolgt auf PayPal oder IBAN, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Eingang der Sendung.
- Für Rückgabe oder Umtausch schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

Kommt das Produkt beschädigt oder mit einem Verarbeitungsfehler an, melden Sie sich sofort — das klären wir ohne Kosten für Sie.

KidsNest ist ein Kissen zur Alltagsunterstützung, keine medizinische Behandlung. Es stellt keine Diagnose und ersetzt keinen ärztlichen Rat. Halten Beschwerden an, verstärken sie sich oder treten sie nach einer Verletzung auf, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.